



natural-fill

FOR NATURAL BEAUTY

natural-meso

FOR NATURAL BEAUTY

STERILE SINGLE USE FILLER CANNULA / NEEDLE


natural-fill ?

Natural-fill se puede realizar mediante un único acceso punto, y la longitud extendida de una cánula permite la selección del área de incisión más segura. También puede ser doblado alrededor de las estructuras de los tejidos y expulsar la sangre vasos y nervios, donde una aguja simplemente pasaría mediante. Por lo tanto, la cánula puede reducir el dolor y acortar tiempo de recuperación, lo que hace que el procedimiento sea más cómodo para el paciente. Además, la blunt cánula ayuda a reducir los riesgos de embolia arterial intravenosa, mejorar la seguridad del paciente

- Menos tiempo de inactividad
- Llenado la solución
- Liposucción
- Seguridad, no lastimar la vena
- Llenando los varios lugares con una cánula

Ultra Thin Wall Cannula (UTW)

En el proceso de inyección, algunos médicos tienen problemas con inyección debido a la fuerte viscosidad, cohesividad y dureza del gel de la solución. Por lo tanto, proporcionamos Cánula de pared ultradelgada (UTW) que tiene un interior más ancho diámetro para una inyección suave y es más flexible que cánula normal.

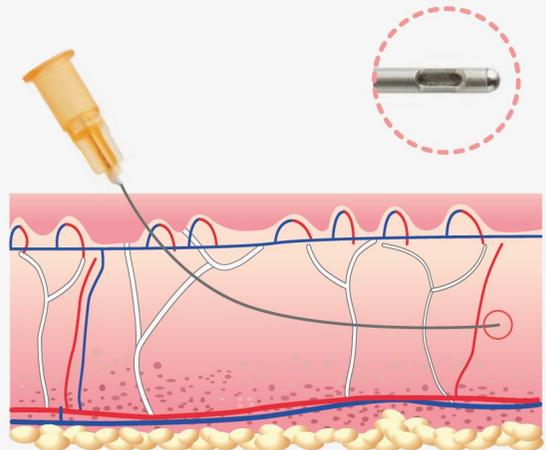

Región anatómica	Recomendación de cánula
Patas de gallo	25, 27, 30G : 25 ~ 40mm
Frente	25, 27G : 38 ~ 50mm
Ceja	25, 27G : 25 ~ 50mm
Temporal, Tercio medio de la cara, Tercio inferior de la cara	25, 27G : 38 ~ 50mm
Labios	25 - 30G : 25 ~ 40mm
Mentón, Cuello, Escote, Manos	25 - 27G : 38 ~ 50mm

Gauge	Length
17G	70 / 90mm
18G	50 / 60 / 70 / 90mm
19G	50 / 60 / 70 / 90mm
20G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
21G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
22G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
23G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
24G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
25G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
26G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
27G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
29G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm
30G	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 90mm

natural-fill

FOR NATURAL BEAUTY

alfa

Flexible Cannula

La filler cánula está diseñada con una punta redondeada y una cánula flexible que reduce notablemente la posibilidad de lesión de los vasos sanguíneos contraídos con otros tipos de agujas.



CE 1370

La graduación muestra el volumen de inyección y ayuda control delicado de los usuarios para obtener los mejores resultados del procedimiento.


Cánula avanzada

La cánula aplicada de procesamiento fino proporciona una excelente uniformidad, excelente flexibilidad y excelente rendimiento.



Hub de policarbonato

El policarbonato es un termoplástico que tiene una propiedad ligera pero dura. Esta clasificado como un plástico de ingeniería con las características de excelente fuerza, resistencia al calor, resistencia al impacto y transparencia.

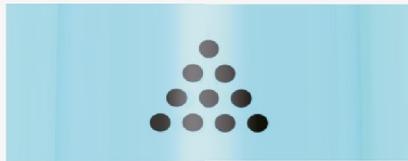

Indicador para el control preciso

El indicador está diseñado para encontrar fácilmente agujero en la punta. Esto apoya visualmente profesionales para el control preciso de Dar el trato espléndido.



Graduación para la delicada inyección

La graduación muestra el volumen de inyección. y ayuda a los usuarios al delicado control del mejores resultados del procedimiento.



UV adhesive

El adhesivo UV (rayos ultravioleta) tiene ventajas tales como alta fuerza adhesiva y fijación de precisión, excelente resistencia química, resistencia a la humedad y resistencia al calor, y su característica transparente hace posible realizar un excelente diseño.

natural-fill
FOR NATURAL BEAUTY
combo

Advanced Cannula with Graduation + Guide Needle

*** Aguja guía: perfora la piel para entrar en el espacio previsto antes de usar la cánula.**

Para un procedimiento suave, **aguja guía y natural-fill beta** están empaquetados juntos. La aguja guía incluida en natural-fill comobo facilitará la perforación de la piel sin importar el tamaño de cánula que se utilice.

natural-fill
FOR NATURAL BEAUTY
beta

Advanced Cannula with Graduation

Cannula		Guide Needle	
Gauge	Length	Gauge	Length
30G	25mm	27G	13mm
27G	40mm	26G	13mm
25G	50mm	23G	25mm
25G	40mm	23G	25mm
23G	50mm	21G	25mm
22G	70mm	21G	25mm
22G	50mm	21G	25mm
18G	50mm	-	-



CE 2292



natural-meso

FOR NATURAL BEAUTY



La aguja de pared delgada permite menos fuerza de extrusión y da como resultado una inyección más suave. La aguja de meso terapia se usa de manera efectiva de varias maneras, como la inyección de ácido hialurónico, anestésicos locales, mesoterapia y placenta, así como una solución altamente viscosa.

Gauge	Length
27G	4 / 13mm
30G	4 / 6 / 8 / 10 / 13mm
31G	4 / 6 / 8 / 10 / 13mm
32G	4 / 6 / 8 / 10 / 13mm
33G	4 / 6 / 8 / 13mm
34G	4 / 6 / 8 / 13mm